


OZNAKOWANIE NICI



Zobacz, co oznaczają skróty i oznaczenia widoczne na opakowaniach nici.
Dobierz nici chirurgiczne odpowiednio względem struktury, materiału i innych parametrów. Szczegóły wykonania mają wpływ na właściwości nici i igieł.

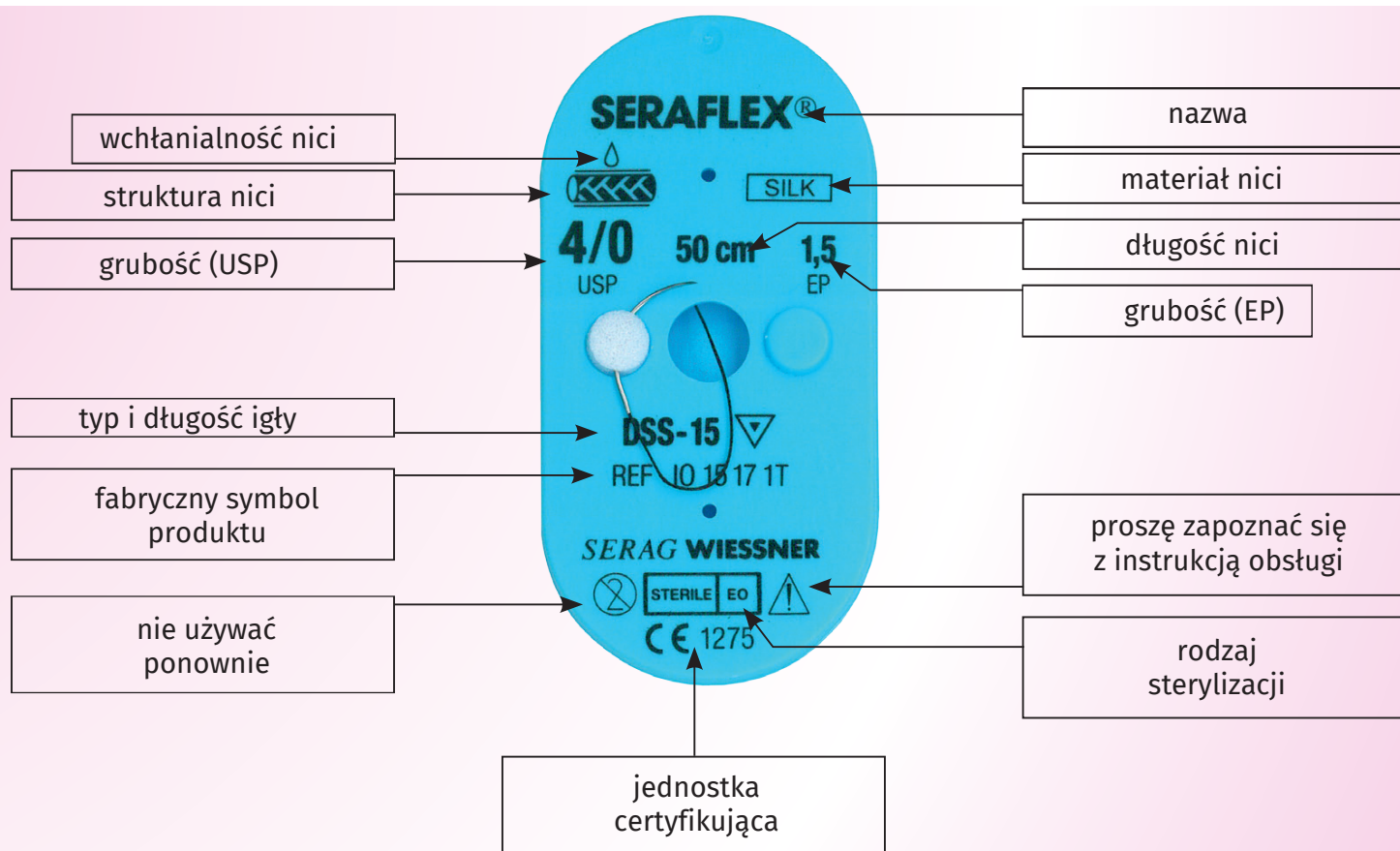

SKONTAKTUJ SIĘ

Wolisz, żeby to Specjalista dobrał dla Ciebie odpowiednie nici?
Chcesz złożyć zamówienie lub dopytać o szczegóły?
Nasz Specjalista jest do Twojej dyspozycji.

Michał Sikora

T.: 48 882 185 520, (12) 423 49 17

E.: m.sikora@fmdental.pl

Michał chętnie odpowie na wszelkie Twoje pytania.

Wyłączny dystrybutor nici Serag-Wiessner
w kat. nici do chirurgii stomatologicznej
oraz szczękowo-twarzowej w Polsce: FM Dental

fmdental®
JAKOŚĆ BUDUJE PRZEWAGĘ



**zaskanuj kod QR
i dowiedz się
więcej o niciach
marki Serag-
Wiessner**

www.fmdental.pl
fb.com/fmdentalpl

PARAMETRY NICI

struktura i wchłanianie



nić niewchłaniająca,
monofilamentowa, barwiona
(np. Seralon)



nić niewchłaniająca,
multifilamentowa, (pleciona),
powlekana, barwiona lub
bezbarna (np. Sulene,
Terylene, Seraflex)



nić niewchłaniająca,
multifilamentowa (skręcana),
powlekana, barwiona lub
bezbarna (np. Supramid)



nić wchłaniająca,
multifilamentowa (pleciona),
powlekana, czarna lub
bezbarna (np. Serafit, Serapid)



nić wchłaniająca,
monofilamentowa, barwiona lub
bezbarna (np. Serafast)

sposób sterylizacji

STERILE

EO

sterylizacja gazowa
(tlenek etylenu)

STERILE

R

sterylizacja
promieniowaniem
gamma

materiał nici

PA

poliamid

PP

polipropylen

PET

poliester

PVDV

polifluorek winylidenu

SILK

jedwab

PDO

polidoksanon

PGAC

kwask poliglikolowy i kaprolakton

L PGA

kwask poliglikolowy

PARAMETRY IGIEŁ najczęściej stosowanych w stomatologii

Czytelne znakowanie igieł pozwoli Ci dobrać igłę o optymalnych właściwościach, odpowiednio względem rodzaju wykonywanych zabiegów.

kształt	typ (rodzaj cięcia)	dodatkowe cechy	długość
D $\frac{3}{8}$ koła	R stożkowe (okrągłe)	S dodatkowo zwężone	bezwzględna długość w mm
H $\frac{1}{2}$ koła	S odwrótnie tnące	T trokar	
przykładowe oznakowanie: igła DSS 15			



**zaskanuj kod
QR, zobacz
wszystkie
rodzaje igieł
i porównaj igły
w widoku 3D**

Rodzaj stali

Wszystkie igły Serag-Wiessner wykonano z najlepszej, odpornej na korozję stali chirurgicznej oznaczonej symbolem 300, który określa skład i rodzaj stopu. Stal 300 zapewnia optymalną elastyczność i twardość igły. Dzięki temu lekarz może łatwo, wygodnie i bezpiecznie operować w polu zabiegowym.

Michał Sikora
T.: 48 882 185 520,
(12)423 49 17
E: m.sikora@fmdental.pl

FM Produkty Dla Stomatologii
Wojciech Feć, Maciej Feć, Sp.J.
J.Lea 112, 30 -133 Kraków

Serag-Wiessner
GmbH & Co. KG Zum
Kugelfang 8, 95119
Naila, Niemcy

Biuro Obsługi Klienta
T: 12 423 49 20
E: sprzedaz@fmdental.pl

www.fmdental.pl
fb.com/fmdentalpl

www.serag-wiessner.de